



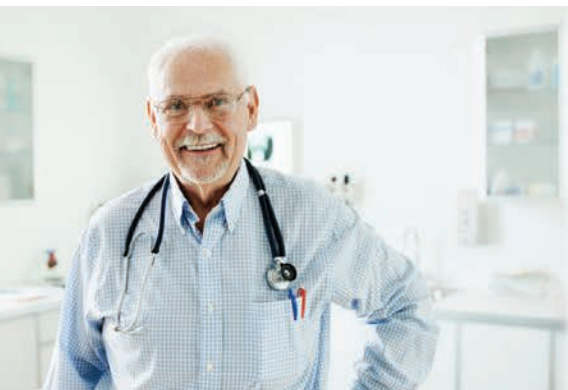

Morcelador VersaCut™

Sistema de Precisión para la Eliminación de Tejido Endoscópico

El morcelador VersaCut, proporciona una rápida y eficiente eliminación endoscópica del tejido blando. El morcelador es ideal para eliminar el tejido prostático reseccionado de la vejiga después de una enucleación de la próstata con el láser holmium (HoLEP). El sistema de bomba de vacío es operado por un pedal que permite el control preciso del nivel de succión y velocidad de morcelación.

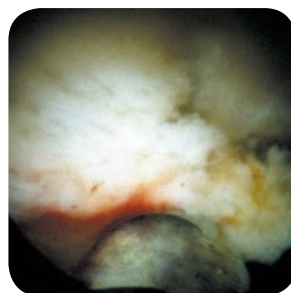

La succión y el movimiento de la hoja permiten una rápida morcelación del adenoma enucleado, después de realizar el HoLEP



HoLEP es equivalente endoscópico de una prostatectomía abierta con fibra actuando en la punta del dedo.




El tejido colectado después de la morcelación está disponible para un análisis histológico.

HoLEP resiste la prueba del tiempo.

- Proporciona el cuidado estándar para el tratamiento de BHP (HoLAP & HoLEP): La AUA y la EAU la respaldan como la primera opción de tratamiento¹
- Extensa evidencia clínica: HoLAP y HoLEP tienen mas de 14 ensayos aleatorios controlados.
- Datos de 2,3,4,5,6 y 7 años de 5 instituciones.

Durabilidad de HoLEP a los 6 años²

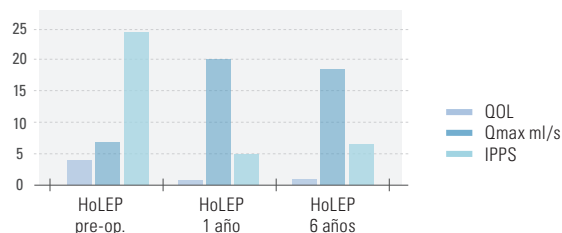

- Morcelación ajustable y velocidad de aspiración que proporcionan la máxima flexibilidad
- Tamaño compacto que se adapta a todos los ambientes de quirófano
- Pieza de mano ergonómicamente diseñada para uso con mano izquierda o derecha
- Juego de cuchillas reutilizables que mejoran su rentabilidad

Accesorios



Pieza de mano reusable
P/N 0637-201-01
Ergonómicamente diseñada para uso con mano izquierda o derecha




Caja de Control
P/N 0637-202-01
Permite un ajuste preciso de la velocidad de aspiración y de morcelación



Tubo estéril
P/N 2521-0219
Permite la aspiración y la recuperación de tejido




Set de cuchillas
P/N 0636-454-01
Set de cuchillas reusables, lo que baja el costo por caso

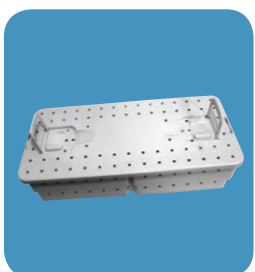

Bandeja de esterilización
P/N 0636-469-01
Diseñada para la esterilización de: pieza de mano, set de cuchillas y adaptadores de endoscopio



Pincel corto de limpieza
P/N 5404-0061
Asegura la completa eliminación de los desechos antes de la esterilización (3 paquetes)

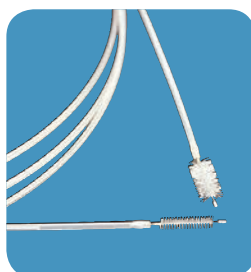

Pincel de limpieza largo
P/N 5404-0060
Asegura la completa eliminación de los desechos antes de la esterilización (3 paquetes)



Adaptadores de endoscopio
P/N 0637-191-01
Se ajusta a las cuchillas para dar cabida a diferentes alcances de longitudes (3 paquetes)

Especificaciones	
Número de producto	VersaCut 0637-245-01
Componentes reusables de la pieza de mano	Equipo, set de cuchillas, bandeja de esterilización, kit de adaptador de endoscopios, cepillos de limpieza cortos y largos, tubo de esterilización y manual del operador.
Alcance de compatibilidad	Endoscopio de flujo continuo con ≥ 5 mm (26F) canal de trabajo recto
Velocidad de morcelación	7 gr./minuto, aproximadamente
Dimensiones equipo	13 cm x 28 cm x 29 cm
Dimensiones de la pieza de mano	21 cm x 8 cm x 5 cm
Peso equipo	10.8 kg
Peso pieza de mano	0.9 kg
Sistema eléctrico	100/115 V ~50/60 Hz, 3.15 A fase simple o 230 V ~50/60 Hz, 1.6 A fase simple

www.lumenis.com | www.adisat.com/surgical



¹ AUA guidelines for BPH, 2003 - http://www.auanet.org/content/guidelines-and-quality-care/clinical-guidelines/main-reports/bph-management/chapt_1_appendix.pdf; EAU guidelines for BPH, 2005 - http://www.uroweb.org/fileadmin/tx_eauguidelines/2009/Pocket/BPH.pdf; New ureteral stone guidelines reflect treatment changes - Urology Times, Jan 2008, Vol. 36, No. 1.

² Holmium Laser Enucleation of the Prostate; Results at 6 Years, Gilling PJ, Aho, TF, Frampton CM, et al. Eur Urol 2008 Apr;53(4):744-9