

EMSLIM es el más avanzado e intensivo estimulador muscular electromagnético.



El campo electromagnético focalizado atraviesa la piel y la grasa para estimular eficazmente el músculo, proporcionando contracciones continuas más intensas, lo que es ideal para el crecimiento muscular y también induce la apoptosis.

EMSLIM es un dispositivo HI-EMT diseñado para fines estéticos, que tiene 2 (dos) aplicadores con alta intensidad.

Su tecnología de vanguardia para el contorno corporal no invasivo, no solo quema grasa, sino que también desarrolla músculo.

Esta es la clave para un físico tonificado y saludable.

#### Nueva tecnología para adelgazamiento corporal no invasivo.



Dos aplicadores se colocan en el área muscular objetivo, como abdominales, muslos o glúteos. Los aplicadores generan electromagnetismo intenso que causa contracciones musculares involuntarias.




# Dos aplicadores

Estas contracciones desencadenan la liberación de ácidos grasos libres, que descomponen los depósitos de grasa y aumentan el tono muscular y la resistencia.

Esto es muy similar a hacer ejercicio.

Mientras se ejercita, la estimulación provoca la reconstrucción y reparación del tejido muscular, lo que da como resultado músculos más fuertes y firmes.

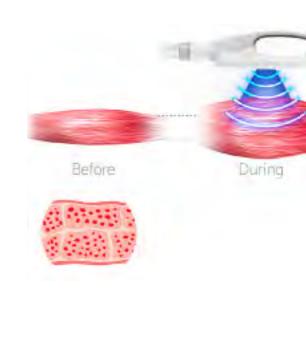




Tecnología médica no invasiva que se utiliza para fortalecer y reeducar los músculos mediante la interacción del campo magnético con el tejido del paciente.

Contrariamente a las contracciones musculares voluntarias, las contracciones supra máximas son independientes de la función cerebral.


El HI-EMT utiliza un rango específico de frecuencias que no permite la relajación muscular entre dos estimulaciones consecutivas.

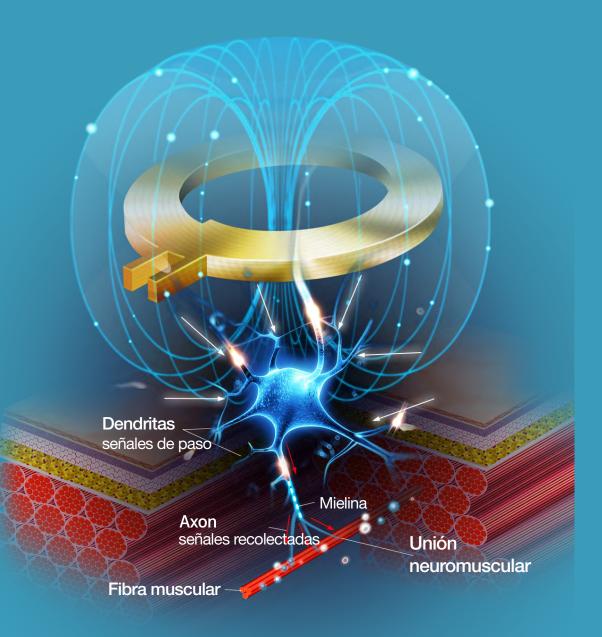



#### Probada tecnología

HI-EMT utiliza un rango específico de frecuencias que no permite la relajación muscular entre dos estimulaciones consecutivas. El músculo se ve obligado a permanecer en estado contraído durante varios segundos. Cuando se expone repetidamente a estas condiciones de alta carga, el tejido muscular está estresado y se ve obligado a adaptarse.

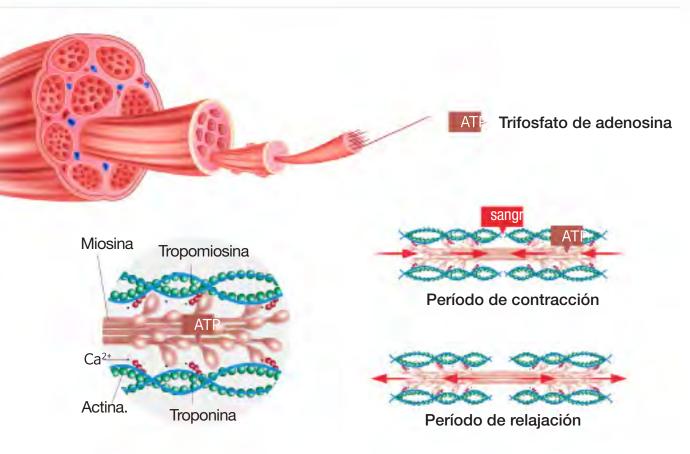

Los impulsos nerviosos desencadenan una reacción bioquímica que hace que la miosina se adhiera a la actina.

Mecanismo de contracción muscular.

Estudios recientes mostraron, que en promedio, se observó un aumento del 15% al 16% en el grosor del músculo abdominal en pacientes tratados dos meses después del tratamiento HI-EMT.






# HI-EMT Entrenador Muscular Electromagnético de Alta Intensidad

Es la tecnología médica usada en medicina estética. Utiliza un nivel seguro de intensidad de campo electromagnético focalizado

El campo electromagnético pasa de manera no invasiva a través del cuerpo e interactúa con las neuronas motoras con la subsecuentes contracciones supramaximales musculares. HI-EMT se utiliza para el contorno corporal no invasivo de abdomen y glúteos.



El resultado en varios estudios recientes con CT, MRI y evaluaciones de ultrasonido, han mostrado la reducción de aproximadamente el 19% en la capa de grasa subcutánea en pacientes tratados con dispositivos basados en HI-EMT en el abdomen. El principio de la apoptosis celular inducida por el aumento de las concentraciones de ácidos grasos libres se ha observado y demostrado previamente en numerosos estudios.

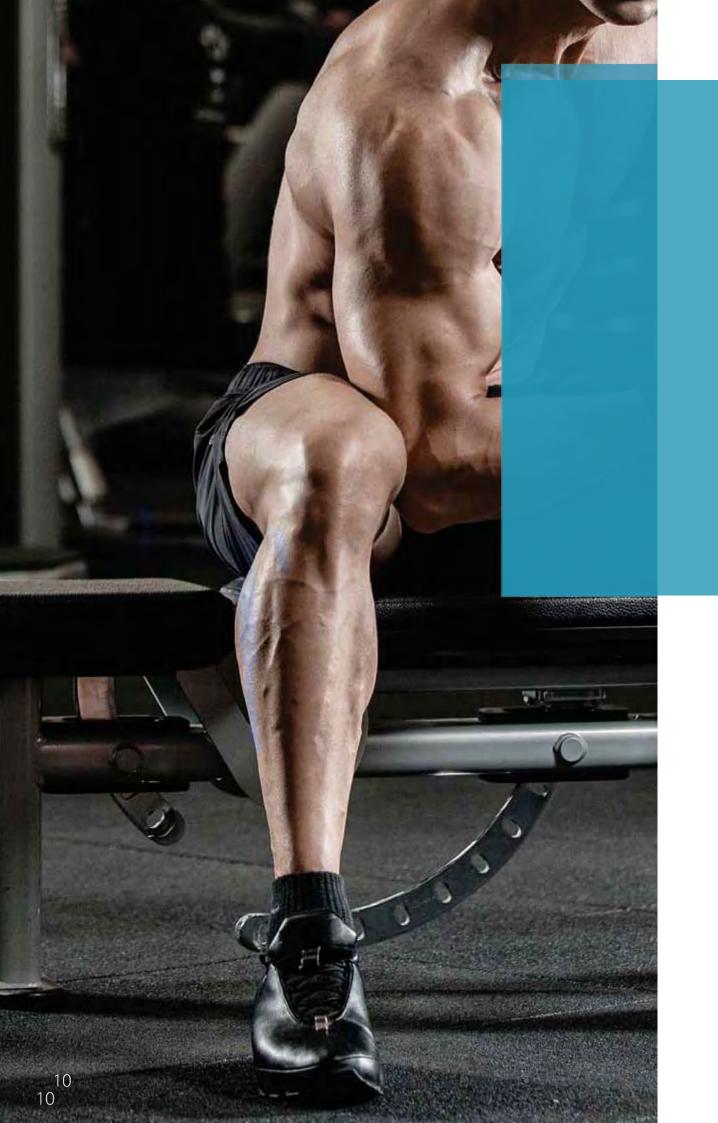



# Información de sesión

La sesión de tratamiento con EMSLIM no requiere anestesia, incisiones o molestias. De hecho, los pacientes pueden sentarse y relajarse, mientras que el dispositivo realiza el equivalente a más de 20,000 abdominales o sentadillas sin dolor.



#### Curso Hercules

Desarrollo muscular

#### Curso David

Quemando grasa

Tratamiento	1	2	3	4	5	6
Programa	Hypertrophy	Combo2	Hypertrophy	Combo2	Hypertrophy	Combo2
				1		
Tratamiento	1	2	3	4	5	6
Programa	HIIT	Combo1	Strength	Strength	HIIT	Combo1

La sesión de tratamiento individual dura solo 30 minutos y uno hay tiempo de inactividad. 2-3 tratamientos por semana serían suficientes para obtener resultados perfectos para la mayoría de las personas. En general, se recomiendan 4-6 tratamientos.



# Programa de entrenamiento

El programa de entrenamiento exclusivo de EMSLIM consiste en series de un programa de entrenamiento físico real, que ha sido diseñado idealmente para la estimulación máxima que conduce a los mejores resultados.

Curso Venus Desarrollo

Desarrollo muscular


Curso Aphrodite

Quemando grasa

Tratamiento	1	2	3	4	5	6
Program	Hypertrophy	HIIT	Combo2	Hypertrophy	HIIT	Combo2
Tratamiento	1	2	3	4	5	6
Program	HIIT	Combo 1	Strength	HIIT	Combo2	HIIT

Además, EMSLIM es un tratamiento extremadamente eficiente que se lleva a cabo en el transcurso de 10-14 días, en lugar de meses, y también produce abdominales más tonificados y glúteos contraídos en dos a cuatro semanas.



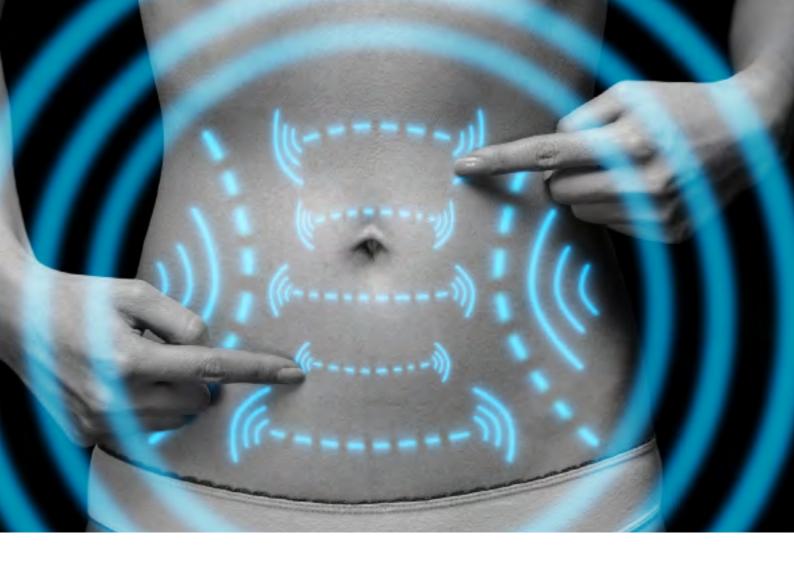



## Tecnología de enfriamiento

Nuestro sistema de enfriamiento por agua optimizado hace que EMSLIM sea muy efectivo para operar durante mucho tiempo sin ningún tiempo de inactividad.

Aún más, ya no hay preocupaciones por fugas de aceites.



#### Ventajas EMSLIM

Intensidad de salida

#### Tesla 7

La salida Tesla 7, base de HI-EMT, permite que la energía electromagnética pueda abarcar grandes músculos esqueléticos del cuerpo humano. Eso significa que el proceso de reeducación muscular de EMSLIM es lo suficientemente profundo como la contracción muscular normal. La estimulación muscular eléctrica superficial es incomparable.



### Entrenamiento manual

Nuestra tecnología de vanguardia permite ajustar el ancho del pulso electromagnético en un rango muy amplio. Para que no tenga que atenerse a unos pocos ajustes preestablecidos, puede diseñar un programa especial de tratamiento manual para las necesidades de su paciente.



#### Sin suministros adicionales, EMSLIM NO TIENE CONSUMIBLES



Su perfecto sistema de enfriamiento por agua, hace MÁS FUERTE a EMSLIM



Gran durabilidad: garantía de 10,000 tratamientos



Garantía de cobertura total de 1 año



Cómoda operación - Interfaz de usuario/ PRE ESTABLECIDA FÁCIL Y RÁPIDA





## Antes y Después

Incluso si no está en forma óptima, puede experimentar los beneficios de EMSLIM durante años con ejercicio regular y alimentación equilibrada.



M1-antes-frente

M1-después-frente



M1-antes-lateral

M1-después-lateral



# Antes y Después





- P ¿Candidato?
- R Cualquiera
- P ¿Tiempo de inactividad?
- **R** Ninguno
- P ¿Cuánto tiempo?
- R 30 minutos por sesión

- P ¿Cuánto tiempo puedo usarlo?
- **R** Sin límite
- P ¿Cuánto tiempo dura?
- R Extremadamente largo
- P ¿Suministros adicionales?
- R Sin consumibles



- la semana
- 4-6 Tx

- P ¿Garantía?
- R 1 año

- P ¿Programa manual?
- **Modo manual** fácil y efectivo



#### LCD

## Especificaciones

Energie	Entrada de alimentación	230 V 50/60 Hz			
Energía	Máximo consumo de energía	2.3 kVA			
	Amplitud de inducción magnética (intensidad)	0~7 Tesla			
Estimulación magnética	Forma de estimulación del pulso.	Bifase			
	Duración del pulso	300 µs			
	Tamaño (alto x ancho x profundidad)	420 x 660 x 1150 (mm)			
Dimensiones:	Peso	70 kg			
	Tipo de seguridad	В			
País de origen	República del Corea				
Fabricante	DAEYANG MEDICAL CO., LTD				



Aplicador (2EA)







#### www.adisat.com

T.+82 (0) 33 747 4466 F.+82 (0)33 747 1133 147 Donghwagongdan-ro,Wonju-si, Gangwon-do, Republic of Korea