



AcuPulse



Plataforma Láser CO₂ MultiMode™ SuperPulse™

Su puerta de entrada al futuro
de las soluciones estéticas y
de salud para la mujer.

No solo construimos tecnología, creamos un mundo de soluciones.

AcuPulse™ es la plataforma de rejuvenecimiento y ablación completa, con tecnología de vanguardia para el rejuvenecimiento estético y las necesidades de salud de las mujeres. Desarrollado por Lumenis®, contrarresta una amplia gama de problemas estéticos y quirúrgicos. AcuPulse™ restaura no solo la salud, sino también la confianza que permite a sus pacientes vivir la vida en sus propios términos y disfrutar todo lo que tiene para ofrecer.

Vive la vida al máximo.

Plataforma Sencilla Poderosa. Versátil.

Tecnología SuperPulse™

- ✔ Ablación excepcional/ coagulación proporcional
- ✔ Alcance la profundidad de tratamiento deseada con un solo pulso.

Duración del pulso corto.

- ✔ Mayor comodidad del paciente.
- ✔ Minimizando el daño térmico.

11 modos de tratamiento incorporados

- ✔ Máxima versatilidad con dos escáners.
- ✔ Control de parámetros completo para usuarios avanzados.

Intuitiva interfaz de usuario.

- ✔ Fácil configuración y rápidos tratamientos.
- ✔ Ajustes de usuario para inicio de tratamiento en un clic.



Tecnología única SuperPulse™ y una gama completa de capacidades avanzadas de onda continua.

SuperPulse™

- Elevado pico de potencia
- Impacto profundo
- Zona térmica reducida y controlada






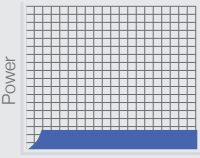
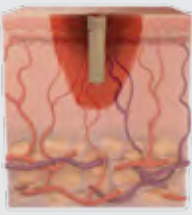
Modo Deep AcuPulse™
 Tamaño de spot 120µm
 Energía 20mJ
 Densidad 15%
 Profundidad de penetración: 700µm

Up to 1mm in a single pulse

No indicativo de resultados clínicos.

Continuous Wave (CW)

- Pico de potencia reducido
- Impacto superficial
- Zona térmica más amplia


Modo AcuPulse™ Superficial™ Tamaño de spot: 1.3mm
 Energía 170mJ
 Densidad: 60%
 Profundidad de penetración: 150-200µm

No indicativo de resultados clínicos.

Velocidad de ablación/coagulación óptima

Cuando la profundidad de la ablación es igual, mayor energía significa un exceso de calor en el tejido. La tecnología SuperPulse™ permite una penetración profunda con poca energía. Esto reduce la molestia del paciente, el tiempo de inactividad y daño térmico.

AcuPulse™ también permite pulsos cortos, lo que mejora aún más la comodidad del paciente.

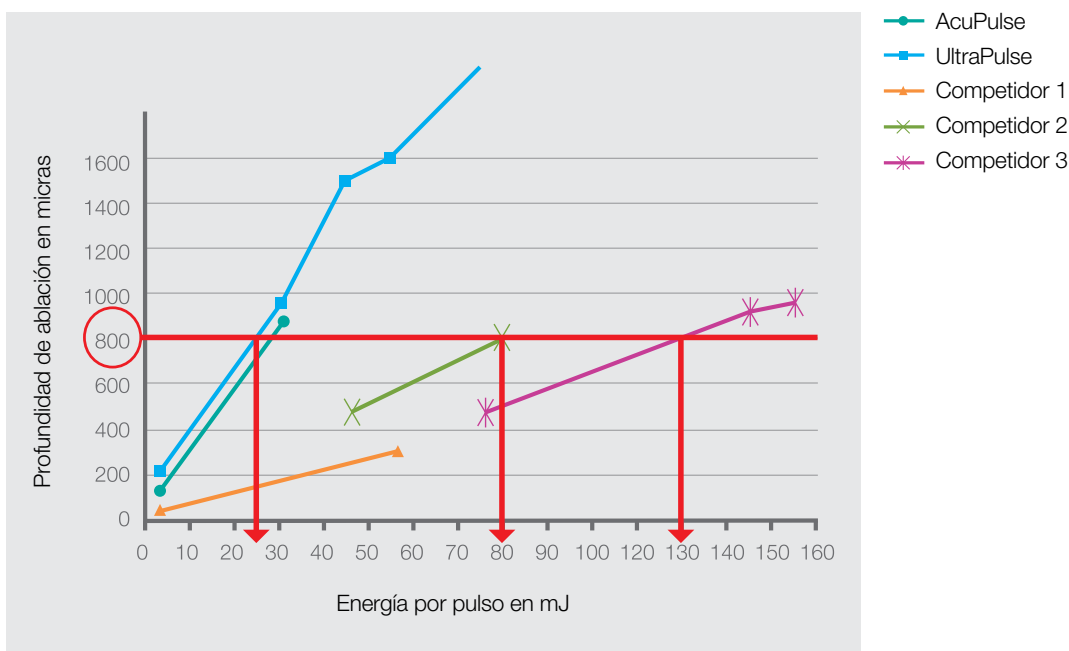

MultiMode™:

11 modos de tratamiento para una máxima versatilidad.



AcuScan120™
scanner fraccionado

Superficial™

Para pigmentación desigual, líneas finas, textura desigual, discromía, queratosis actínica y más.

Deep™

Para líneas más profundas y arrugas, cicatrices de acné, textura desigual, discromía y más.

Women's health

Para una variedad de indicaciones relacionadas con la salud vulvar.

Combo™

Deep y Superficial combinados para pigmentación desigual, cicatrices de acné, arrugas y más.

StretchTouch™

Para surcos cutáneos e irregularidades texturales.



SurgiTouch™
scanner avanzado



Piezas de mano 260mm, 200mm y 125mm para SurgiTouch™

FeatherTouch™

Para suaves tratamientos en un escaneo.

SilkTouch™

Para tratamientos más vigorosos, de doble barrido.

FineTouch™

Para ablación precisa de lesiones pigmentadas irregulares a varias profundidades.

ToeTouch™

Para enfermedades comunes de los pies, como verrugas plantares y uñas encarnadas.

Paint™

Para los tratamientos controlados y continuos en zonas pequeñas.

Women's health

Para una variedad de indicaciones relacionadas con la salud vulvar y vaginal.



Pieza de mano
incisional 125mm.

Bleph™


Para incisiones precisas, limpias mínimo sangrado.

AcuPulse™ en Estética:

Un camino de confianza hacia resultados sobresalientes

Skin resurfacing

Cortesía de: Dr. Rafael Nunes.

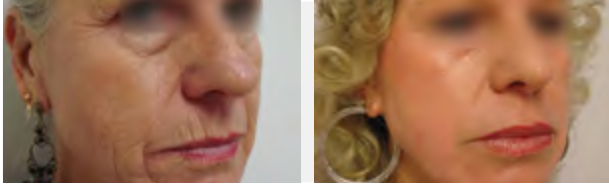

Antes

Después

Skin resurfacing

Cortesía de: Dr. Girish Munavalli,




Antes

Después

Blefaroplastía y resurfacing párpado inf.

Cortesía de: Dr. Girish Munavalli,

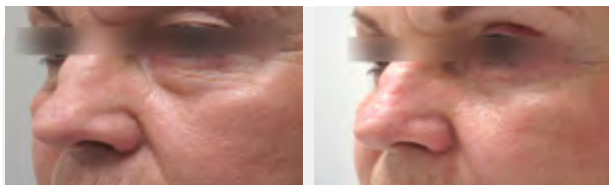


Antes

Después

Remoción de tejidos blandos (lunar)

Cortesía de: Dr. Nariaki Miyata.

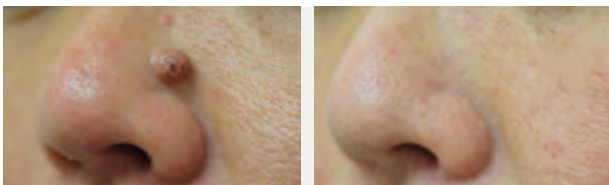

Antes

Después

"He utilizado AcuPulse™ para realizar más de 500 procedimientos con láser de CO2. Lo hemos utilizado para afecciones de la piel tan variadas como verrugas en siringomas y foto daño. El modo Combo es especialmente útil, ya que sus patrones permiten tratamientos fraccionados más profundos (por ejemplo, para cicatrices de acné), al tiempo que permiten un resurfacing superficial más suave para pigmento y líneas finas (todo en un solo paso). "Su tecnología SuperPulse™ me permite ser más agresivo cuando lo necesito, manteniendo un amplio margen de seguridad para el paciente, lo que garantiza que mis pacientes estén satisfechos con los resultados de sus tratamientos después de una sola sesión"

Dr. E. Victor Ross.

"Como cirujano plástico, el láser de CO2 AcuPulse™ es perfecto para mí, ya que puedo ofrecer un tratamiento eficaz en cicatrices. Muchos pacientes acuden a mí porque uso el láser de CO2 y el ResurFX™ poco después de los procedimientos quirúrgicos. Confían en que no tendrán cicatrices y no las tienen".

Dra. Francesca de Angelis.



Salud de la mujer con AcuPulse™:

Solución de 360° de salud para mujeres.

La salud de las mujeres con AcuPulse™ ofrece una gama de soluciones mínimamente invasivas para las mujeres que enfrentan condiciones ginecológicas que afectan su bienestar, confianza e intimidad.

Tratamiento ginecológico

Cuando se opera en una anatomía delicada, el objetivo es, ante todo, evitar el daño térmico. Es por eso que la tecnología láser de CO₂ AcuPulse™ es un tratamiento de elección, adecuado para usar con una variedad de acercamientos y aplicaciones.

Vaginal

- ✓ Absceso vaginal
- ✓ Verrugas genitales
- ✓ Reducción labial
- ✓ Esclerosis de liquen

Colposcopía

- ✓ Neoplasia intraepitelial cervical (NIC)
- ✓ Leucoplasia
- ✓ Condiloma
- ✓ Tumores benignos y malignos.

Laparoscopia

- ✓ Endometriosis
- ✓ Adhesiones
- ✓ Miomas
- ✓ Quistes
- ✓ Histerectomía



Su viaje con Lumenis acaba de iniciar.

Queremos que su negocio crezca con Lumenis. Es por eso que hemos creado un paquete de soporte que comienza con la primera conversación y permanecerá con usted a medida que su negocio comience a ver los beneficios. Proporcionamos un paquete de soporte que le garantiza que recibirá toda la capacitación que necesita y recibirá los materiales clínicos más actualizados.



Localizador de Prácticas Lumenis

Miles de pacientes buscan proveedores de tratamiento cada mes. Ayúdelos a encontrar su clínica registrando su práctica en el Localizador de prácticas de Lumenis. Realizamos campañas a través de personas influyentes, redes sociales y videos virales para promover este directorio.



Lumenis online

Los consumidores tienen muchas preguntas de estética. Nuestros sitios web para pacientes les brindarán la seguridad y la confianza que necesitan para seguir adelante con los tratamientos.



Equipo de entrenamiento

Instalamos el sistema y capacitamos a su personal, para que pueda evaluar los tipos y condiciones de la piel, creando el plan de tratamiento individual perfecto para cada paciente. Nuestro entrenamiento clínico experto significa que manejarán consultas y tratamientos con confianza.



Su recurso más valioso

Su representante está a un correo electrónico, mensaje de texto o una llamada telefónica.



Clínica con marca

Tendrá acceso a una gran cantidad de información clínica y de materiales como brochures y pósters.



Amplia red de servicios

Estamos comprometidos a proporcionar un servicio integral y de alta calidad para la reparación y el mantenimiento de equipos médicos. El servicio de Lumenis le brinda tranquilidad, para que pueda concentrarse en su atención al paciente, en lugar de en el equipo.

Especificaciones

PLATAFORMA	AcuPulse™ 40AES-F, 40AES-R, 40AES-A
Especificaciones técnicas	
Longitud de onda	10,600 nm
Tipo de láser	SuperPulse™ y CW
Potencia sobre el tejido	40 W
Pico de potencia	170 W
Tamaño del spot	min. 0.12 mm / max. 1.3 mm (AcuScan120™)
Tamaño del Scan	hasta 15 x 15 mm
Densidad por Scan	fraccionado: 3-60%, ablación completa: >100%
Capacidades de skin resurfacing completo	si
Capacidades fraccionadas	si
Capacidades incisionales	sí
Capacidades excisionales	sí
Aiming Beam	Láser de diodo rojo de 5 mW, 635 nm, intensidad ajustable
Haz guía	Ligero, brazo de 7 articulaciones, equilibrado por resorte, 120 cm de alcance, rotación de 360°
Ajustes de memoria	min. 100
Enfriamiento	Autocontenida, de ciclo cerrado
Garantía y cobertura	1 año
tratamiento / pases recomendados/	1
Especificaciones de la Plataforma	
Sistema eléctrico	100–240 VAC, 10 A max., 50/60 Hz
Peso.	49 kg
Dimensiones (WxDxH)	37 cm x 40 cm x 119 cm

Advertencias y riesgos

Los láseres de CO2 están diseñados exclusivamente para médicos entrenados en el uso del láser de dióxido de carbono con longitud de onda (10,6 µm). La configuración incorrecta del tratamiento o el uso incorrecto de la tecnología pueden presentar un riesgo de lesiones graves para el paciente y el personal de operación.

Los riesgos que pueden asociarse con cualquier procedimiento con láser de CO2 pueden incluir cambios de pigmentación, infección, eritema, induración de la piel o cicatrización. Lea y comprenda los manuales de operador de los sistemas y accesorios de CO2 para obtener una lista completa de usos, contraindicaciones y riesgos previstos.

El uso del láser de CO2 Lumenis® está contraindicado cuando un paciente ha tomado Accutane (isotretinoína) en los últimos 6 a 12 meses, tiene un historial de formación de queloides y demuestra eritema excesivo o inusualmente prolongado

©2019 Todos los derechos reservados. El Grupo de Empresas Lumenis. su logotipo Lumenis, AcuPulse, UltraPulse, SuperPulse, AcuScan120, SurgiTouch, FeatherTouch, SilkTouch, FineTouch, ToeTouch, StretchTouch y Combo son marcas comerciales o marcas registradas del grupo de compañías Lumenis. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Lumenis tiene la certificación ISO 13485: 2003. AcuPulse es CE aprobado.
| AcuPulse está aprobado por la FDA. PB-1135190 Rev G.

 Lumenis Ltd.
Yokneam Industrial Park
6 Hakidma Street P.O.B. 240
Yokneam 2069204, Israel
Tel: +972-4-959-9000

 Lumenis (Germany) GmbH
Heinrich-Hertz-Str 3 D-63303
Dreieich-Dreieichenhain
GERMANY
Tel: +49 (0) 6103 8335 0

EMEA
Dreieich Dreieichenhain,
Germany
T +49 6103 8335 0
F +49 6103 8335 300


Roma, Italy
T +39 06 90 75 230
F +39 06 90 75 269

Hertfordshire, UK
T +44 20 8736 4110
F +44 20 8736 4119

JAPAN
Tokyo, Japan
T +81 3 6743 8300
F +81 3 6743 8301

AMERICAS
San Jose, CA, USA
T +1 408 764 3000
+1 877 586 3647
F +1 408 764 3999

ASIA PACIFIC
Beijing, China
T + 86 10 5737 6677
F +86 10 5737 6767
Gurgaon, India
T + 91 124 422 07 95
Kowloon, Hong Kong
T + 852 217 428 00
F + 852 272 251 51

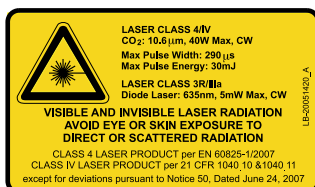

mayor información: www.adisat.com/lumenis/acupulse

LUMENIS.COM/ACUPULSE

